

DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY

UNA GAMA COMPLETA PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES



2, rue des Vieilles Vignes - 77183 Croissy-Beaubourg - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 11 18 18 - info@owandy.com - www.owandy.com




ONE

LA SIMPLICIDAD AL ALCANCE DE LA MANO
SENSOR INTRAORAL DIRECTO USB

3ª generación

one

EL SENSOR INTRAORAL ACCESIBLE Y FÁCIL DE USAR

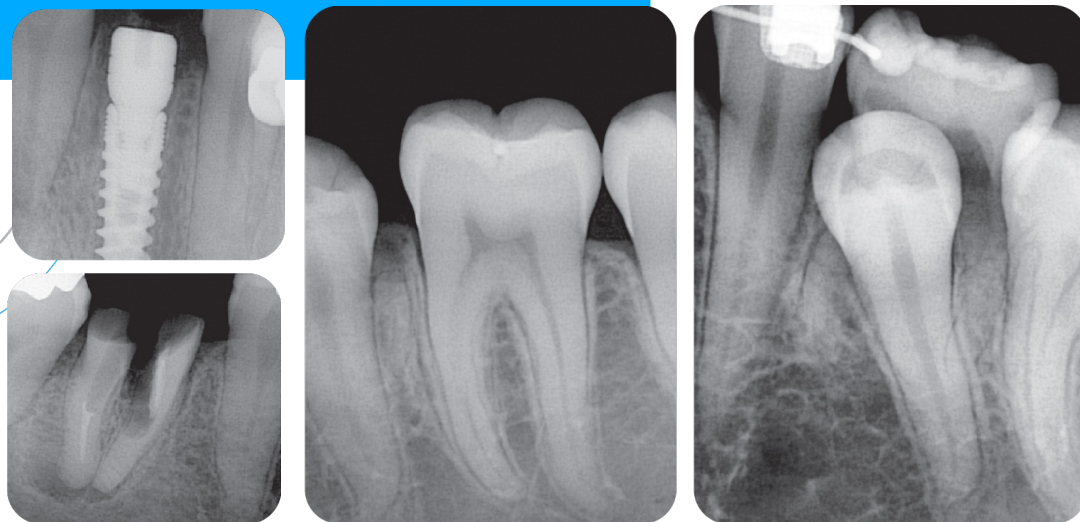

Todo en uno

Sensor con diseño ergonómico y tecnología CMOS de última generación.

Calidad de imagen HD

Descubra una claridad inigualable con el nuevo sensor One de tercera generación.

Mayor comodidad

Disfrute de una experiencia de uso más cómoda gracias a nuestra innovadora tecnología "Always On".

Nueva tecnología WDR (Wide Dynamic Range)


La tecnología WDR garantiza capturas siempre precisas, independientemente del nivel de exposición.



Todo en uno


One es un sensor intraoral equipado con tecnología CMOS. Su ergonomía y diseño han sido concebidos para adaptarse perfectamente a su práctica. Las esquinas redondeadas y los bordes biselados del dispositivo ofrecen una verdadera facilidad de posicionamiento tanto para usted como para su paciente.

La comodidad intraoral se optimiza gracias a la delgadez del sensor y del cable.

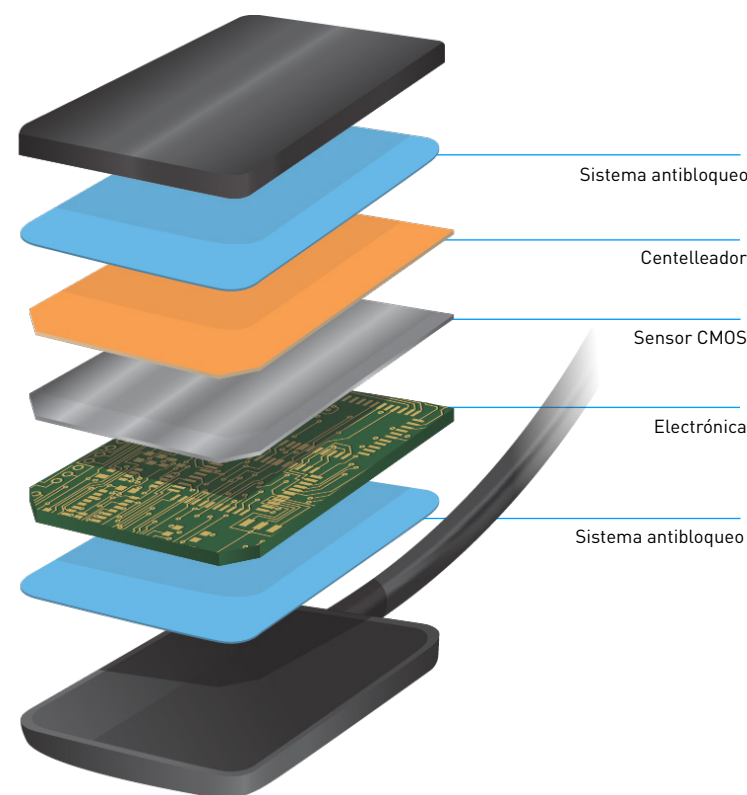

Calidad de imagen HD

Descubra una claridad excepcional con el sensor One de tercera generación, con una calidad HD de 18,5 micras.

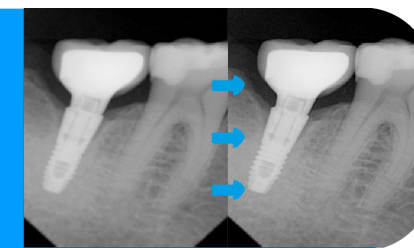


Tecnología "Always On"

El sensor One está listo para usarse al instante, sin necesidad de calentamiento previo, lo que permite un flujo de trabajo fluido. Con "Always On", capture imágenes intraorales sin interrupciones.



Nueva tecnología Wide Dynamic Range

La tecnología WDR mejora considerablemente la nitidez de las imágenes y garantiza capturas precisas en todas las circunstancias. WDR se adapta para ofrecer una calidad de imagen óptima en cada uso.

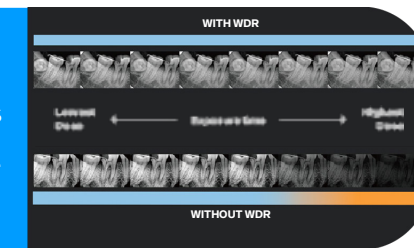

UNA CONCENTRACIÓN DE TECNOLOGÍA QUE SIMPLIFICA LA IMAGEN INTRAORAL



Endodoncia



Cirugía protésica e
implantológica



Periodoncia



Diagnóstico
de caries

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Tamaño 1	Tamaño 2
Sensor	CMOS	
Scintilador	CsI	
Dimensiones externas del sensor (largo x ancho x grosor)	38 x 27,4 x 5 mm	43 x 31,6 x 5 mm
Superficie activa	22 x 30 mm (660 mm ²)	26 x 35 mm (910 mm ²)
Tamaño de los píxeles	18,5 x 18,5 µm	
Conexión	USB directo: High-Speed USB 2.0 and USB 3.0	
Sistema operativo	Windows 10/11	



Finalmente, el dispositivo es completamente impermeable. Puede elegir entre varios métodos de desinfección.